

## סקארבן – סידרה של מוצרים באיכות גבוהה לטיפול בצלקות.

### התוויות:

- סקארבן מומלץ לטיפול בצלקות היפרטרופיות וקלאודיות קימות וחדשות.
- מניעת היווצרות צלקות היפרטרופיות וקלאודיות.
- טיפול בצלקות כתוצאה מכוויות.

### תאור המוצר סקארבן:

- חבישות סיליקון נדבקות וניתנות לחיתוך לטיפול בצלקות, זמינות בשתי צורות, חבישה קלה (Light) וחבישה גמישה (Elastic).
- חבישת הסיליקון סקארבן בנויה מ 100% תקריש (gel) סיליקון רפואי בשכבות גמישות ושכבות מגנות.
- הלבשת סיליקון רפואי וחבישות סיליקון מיוחדות הניתנות לגזירה לגודל המתאים לכוויות, ניתוחים פלאסטיים וניתוחי עור. הלבשות הסיליקון מיוצרות מ 100% תקריש של סיליקון רפואי ופוליאמיד (סוג של חומר סינתטי) גמיש.
- סקארבן סבון לניקוי הסיליקון, חומר ניקוי לניקוי חבישות הסיליקון.
- סקארבן תחליב לעור, תחליב להגברת האמולסיה לעור בעל תכונות טיפוליות.


### פעילות:

- חבישות סיליקון סקארבן גורמות לצלקות להתרכך ומורידות את אדמומיותן. בנוסף, חבישת סקארבן אידיאלית למניעת שפשוף ישיר על העור.
- חבישות סיליקון סקארבן אינן סטריליות, נדבקות, ניתנות לרחצה ומתאימות לשימוש חוזר. אין להשתמש בחבישות בפצעים פתוחים.

### דרך השימוש בסקארבן חבישת סיליקון:

- חתוך את סקארבן חבישת הסיליקון בצורה ובגודל הרצויים. חתוך בצורה מעוגלת ללא פינות חדות. (תמונה מס 1).
- תוצאות מרביות מושגות כשהצלקת מכוסה כולה והחבישה מכסה כ 2 ס"מ מהעור הבריא.
- נקה טוב את הצלקת ואת העור סביבה, יש לוודא שהם יבשים ולא משומנים (תמונה מס 2)
- משוך את הרדיד המגן מחבישת הסיליקון סקארבן (תמונה מס 3)
- מקם את הצד הדביק של חבישת הסיליקון סקארבן על הצלקת (תמונה מס 4). הדבק את החבישה בהדרגה על הצלקת כפי שמראה הציור.
- ניתן לשמור את חבישת הסיליקון סקארבן בעזרת רצועת הדבקה או תחבושת אלסטית. (תמונה מס 5)
- בעת הסרת חבישת הסיליקון סקארבן, יש לשים לב להסיר את החבישה מאותו מקום בכל פעם.
- לאחר הסרת חבישת הסיליקון סקארבן, ניתן למרוח את שטח הכיסוי בקרם לחות כגון סקארבן קרם לעור.

### תמונה 5

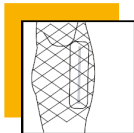

### תמונה 4



### תמונה 3



### תמונה 2



### תמונה 1



### הדרך הטובה לשימוש בסקארבן חבישת סיליקון:

- בהתחלת הטיפול, השתמש בסקארבן חבישת סיליקון למשך 3 שעות ביום. בטיפול רגיל (ללא גירוי בעור) האריך את משך הטיפול בשעה אחת כל יום עד להגעה למקסימום של 20 שעות ביממה. יש להאריך את זמן החבישה בהדרגה כדי לתת לעור להתרגל להשפעת חבישת הסיליקון.
- לתוצאות אופטימאליות, יש להשתמש בסקארבן חבישת סיליקון לפחות 8 שעות ביום ולא יותר מ 20 שעות ביום.


### דרך השימוש בסקארבן כפפות סיליקון:

- בצלקות בידיים או באצבעות, משתמשים בסקארבן כפפות סיליקון. פעילות כפפות הסיליקון גורמת לעור להתרכך ולתנועתיות של המפרקים.
- הלבשת הכפפה, קפל לאחור את קצוות הכפפה.
- שים מעט סקארבן תחליב לעור על היד ובתוך הכפפה ולבש אותה. סקארבן תחליב לעור אף מאריך את אורך החיים של שכבת הסיליקון.
- בכל מקרה אין ללבוש את הכפפה ללא חומר סיכוך.
- לאחר לבישת הכפפה, סובב את קצוות הכפפה חזרה למקומה.

### תחזוקה של סקארבן חבישת סיליקון:

- מרח מספר טיפות של סקארבן סבון לניקוי (או כל סבון טבעי – שאינו מכיל אלוורה) על החבישה (תמונה מס 6). עוצמת הדבק נשחקת לאחר מגע עם סבון הניקוי או עם מים. הסר את הלכלוך ככל שניתן.
- שטוף ביסודיות בעזרת מים זורמים חמימים. (תמונה מס 7)
- חבישת הסיליקון מסתלסלת במגע עם מים (תמונה מס 8)
- בכדי לייבש את החבישה, הנח את חבישת הסיליקון (המסולסלת) על מגבת קטנה כשהצד עם הדבק כלפי מעלה.
- כאשר החבישה יבשה לגמרי, היא מתיישרת בעצמה ועוצמת הדבק חוזרת.
- השתמש בחבישת הסיליקון רק לאחר שהיא יבשה לחלוטין.

### תמונה 8

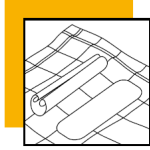

### תמונה 7



### תמונה 6



### זמן השימוש

- כשמשמשים בהתאם להוראות, אורך החיים של סקארבן חבישת סיליקון קלה (Light) בין 1 ל 2 שבועות וסקארבן חבישת סיליקון גמישה (Elastic) בין 4 ל 8 שבועות.

### אזהרות

- אין להשתמש בסקארבן חבישת סיליקון בפצעים פתוחים!
- סקארבן תחליב עור וסקארבן סבון לניקוי פותחו במיוחד להגביר את נוחות הטיפול.
- אין להשתמש במשחה, קרם, תקריש (gel) או בתחליב אחר (שאינו סקארבן) עם סקארבן חבישת סיליקון, אלא עם נרשם על ידי הרופא שלך.
- יש להתייעץ תמיד ברופא בנוגע לגירויים בעור או כל בעיית עור.
- מוצרי סקארבן מיועדים לשימוש חיצוני בלבד.
- מוצרי סקארבן עומדים בסטנדרטי איכות. במידה וסקארבן חבישת סיליקון נשחקה בקצוות, ניתן לקצץ אותן על ידי חיבור חבישת הסיליקון לרדיד פלסטיק וקיצוץ הקצוות.
- אין לייבש את סקארבן חבישת סיליקון תחת השמש או כל מקור חום אחר.
- מוצרי סקארבן בטוחים לשימוש בצלקות אצל ילדים, בכל מקרה יש להרחיק את סקארבן מילדים.

### האריזה מכילה:

- 1 או 4 סקארבן חבישת סיליקון ו 3 מ"ל סקארבן סבון לניקוי (ראה אריזה)

משווק על ידי:  
נובולוג בע"מ  
טלפון 1-800-25-25-40  
ישראל

מיובא על ידי:  
מדוייס בע"מ  
1-700-70-10-27  
תל מונד ת.ד. 3728  
ישראל.

מיוצר על ידי:  
טריקולסט NV  
אומגנסטרט 53  
דיינז 9800  
בלגיה.